

EEFit Lite

依飛 **神** 筆

產品說明書



產品背景

「依飛神筆」是一件既能舒緩各種痛症又能美容養生的創新產品。它發出的能量，能迅速被穴位和身體吸收，產生共振效應，促進血液微循環力，達到舒緩疼痛和養生美容的功效。

中醫經絡學理論和實踐用「氣血循環」一詞來解釋生命現象和健康狀況。「氣」在體內順暢流通與否，關係到一個人是否活力充沛及身體是否健康。任何一個不斷循環的系統，一定要保證暢通，否則就會出現症狀。因此，一個健康的身體首先是一個暢通的身體。如果氣血循環不暢通，造成堵塞，就會引起各種疼痛及病症，即所謂“不通則痛”。

現代科學證明，人們常常提到的「氣」，其是一種推動血液循環的振動頻率，振動頻率即是能量。「依飛神筆」發放的正是這一振動能量。當身體受到這種能量照射，等於幫我們補氣、活血，達到“通則不痛”的功效。

利用光能解決痛症，比貼膏藥、擦藥油、針灸等更快見效、更方便和安全，也有助減少服用止痛藥。這一非侵入、無刺激、無味、無副作用的舒痛養生神筆，適合全家大小，實為家居、工作、旅行必備的養生佳品。

產品對象

適合任何人仕

產品好處


- 快速舒緩身體的各種疼痛和不適症狀
- 有效舒緩蚊蟲叮咬引起的紅腫及疼痛
- 促進細胞新陳代謝和血液微循環能力
- 激活臉部皮下細胞組織，重塑肌膚“年輕態”
- 促進皮膚對外用藥膏或乳霜的吸收力

產品包裝

1. 「依飛神筆」一支
2. **EEFIT** USB專用充電線一條
3. 中英說明書各一份（附穴位圖）

產品資料

1. 電源開 / 關按鈕 (圖1.1)
2. 能量燈輸出口 (圖1.1)
3. USB專用充電線(圖1.2)
4. 防塵尾蓋 (圖1.3)
5. USB充電插口 (圖1.3)

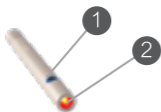

▲ 圖1.1




▲ 圖1.2




▲ 圖1.3

產品用法

- 1 開啟: 長按開關按鈕約2秒直至輸出口處
能量燈閃爍紅光。

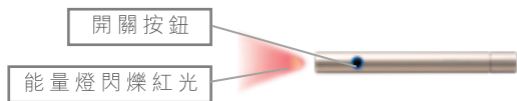

- 2 關閉: 長按開關按鈕約2秒直至輸出口處
能量燈紅光熄滅。

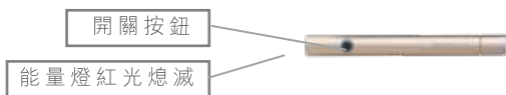


- 3 將光源對準有需要的地方(圖2)，貼住皮膚或隔空1厘米進行照射，照射時間一般在5至15分鐘不等。如有需要可配合所提供的穴位圖使用。



▲ 圖2

充電提示

當開關按鈕由藍光轉為紅光時表示需要充電

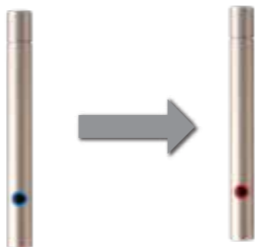

充電方法


1. 將防塵尾蓋打開，內有USB充電插口




2. 將USB專用充電線接至USB插口充電



3. 充電指示燈：
I 紅光亮起：充電中 (圖3.1)
II 藍光亮起：充電完成 (圖3.2)
III 充電時間約45至60分鐘
IV 充滿電可連續使用15小時

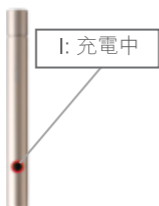

▲ 圖3.1

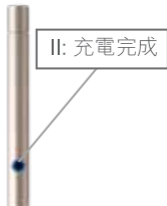

▲ 圖3.2

產品規格

直徑：14.5mm
長度：142mm
重量：44g

電池規格

Li-Ion 10440c 電池
3.7V 320 mah

技術規格

LED 波長：630nm
直流電源輸入：5V
閃動頻率：8.6Hz

使用壽命

能量燈和電池兩者使用壽命均超過十年。
充電時間約45至60分鐘。充滿電可連續使用12小時

使用安全

本產品發射之紅光非鐳射光，對眼睛和身體各部位都十分安全。

安全認證

CE FC

RoHS compliant 

注意事項

請勿放置於高溫、潮濕、陽光直射、灰塵多等地方。
本產品發射之紅光非鐳射光，對眼睛和身體都安全
全家大小可放心使用

免責聲明

產品不可吞食或供兒童當作玩具或接觸，若違反使用方法，對此而造成的任何損失及傷害，本公司不會承擔有關責任。

本公司不保證本產品皆符合不同國家的入口要求，對此等問題將不承擔任何有關責任。

本公司在網上或宣傳品上展示之產品圖片屬參考資料，產品外型及功能以實體為準，本公司保留修正產品任何資料之一切權利。

如不正確使用本產品，本公司將不承擔質量問題。如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

香港服務及維修：

新元科技(亞洲)有限公司

地址：香港荃灣海盛路3號TML廣場CD翼35樓B6

承蒙惠顧本公司產品，不勝感謝！

使用前請仔細閱讀本說明書，以便正確使用。

客戶熱線

(852) 2677 7898