



Chi Vitaliser  
能量活絡儀


2

## 產品說明書


感謝您購買本產品 使用前請仔細閱讀本說明書

# 產品展示


## 正面

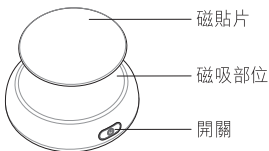

## 背面

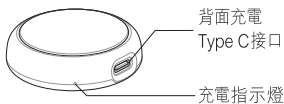



## 底部

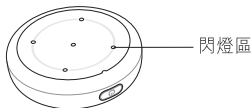

# 使用方法

- 1 連按兩次  
開啟/關閉

按一次可轉換閃爍模式  
(慢閃/快閃)

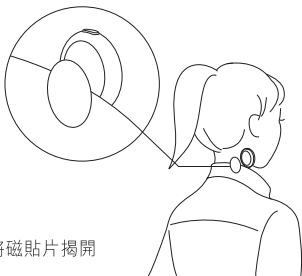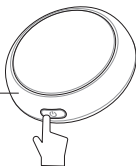


- 2 將磁貼片揭開
- 3 閃光面貼近肌膚
- 4 磁貼片與主機頂部  
隔衣相吸用以固定

# 充電說明

充電指示燈  
(紅色/綠色)



將充電線插入背面  
充電 Type C 接口

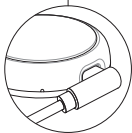

## 充電指示燈



紅燈長亮

充電中



紅燈閃爍

電量不足



綠燈長亮

充電完成

## 閃爍模式



快閃

舒痛模式



慢閃

養生模式

## 注意事項

1. 請勿將產品放置於高溫、潮濕、陽光直射、灰塵多的地方。
2. 請勿讓本產品受到過度衝擊，以免損壞，影響使用。
3. 請勿自行拆解或更換電池，以免發生危險。
4. 請使用隨附的USB充電線進行充電，以免造成產品損壞及危險。
5. 請勿使用電壓超過5V的變壓器為本產品充電，否則可能會導致本產品故障或發生危險。
6. 避免存放在兒童容易接觸的地方。
7. 請勿在損壞或故障情況下使用。

## 產品保養方法

1. 產品應保持清潔，避免接觸酸性、油性、粘性等污物。
2. 如若沾染污物，請用柔軟乾布擦拭。
3. 請輕放，避免與硬物過度碰撞。
4. 避免水或其他液體流入主機內部。

## 包裝清單

主機	x1	產品說明書	x1
USB Type C充電線	x1	穴位手法手冊	x1
磁貼片	x1		



請掃描二維條碼  
以啟動您的產品保用服務



## 保用條款

- 產品如有質量問題，自購買日期起7日內生產商將提供換貨服務。
- 自購買產品日期起1年內，會為產品硬件的缺損提供免費零件更換及維修。
- 生產商不為遺失的配件及產品因有意或無意的濫用、自行拆解、改裝或未經授權的人士修改而可能造成的損壞提供任何保用。
- 生產商不為因意外（包括火災、水災、接觸任何液體等）所產生的損壞提供任何保用。
- 請妥善保存收據，並於維修服務時向職員出示，方為有效。
- 生產商有權隨時修訂上述條款，而毋須先行通知客戶。

## 產品規格

產品名稱：能量活絡儀 2

產品型號：EF19206BK / EF19206WH

產品尺寸：48mm(直徑) x 15mm(厚)

產品重量：37.6g

產品材質：ABS + PC

電池信息：鋰離子聚合物電池 3.7V 400mAh, 1.48Wh

電池續航：10-12小時

充電時間：3小時以下

充電壽命：300次以上

LED 壽命：持續 1000 小時以上

工作電壓：3.0~4.2V

額定輸入：DC 5V 0.2A

光源功率：5 x 0.07W / 2835-LED

執行標準：GB-4706.15-2003

GB 7247.1-2012

GB4208-2008/IP43

香港設計 / 中國製造



客戶服務熱線

(852) 2677 7898

生產商：新元科技(亞洲)有限公司

地址：香港荃灣海盛路3號TML廣場  
CD翼35樓B6室

營業時間：星期一至五 09:00-18:00 (午休13:00-14:00)  
星期六、日及公眾假期休息