




Chi Vitaliser 
能量活絡儀

產品說明書


感謝您購買本產品 使用前請仔細閱讀本說明書

產品展示


正面

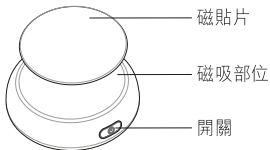

背面

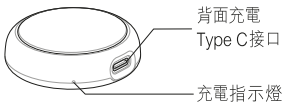



底部

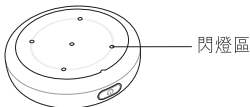


使用方法

- 1 長按2秒
開啟/關閉

按一次可轉換閃爍模式
(慢閃/快閃)

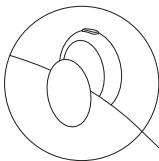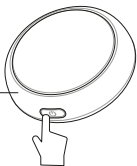

- 2 將磁貼片揭開

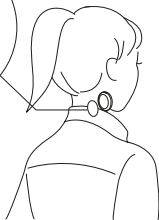

- 3 閃光面貼近肌膚


- 4 磁貼片與主機頂部
隔衣相吸用以固定

充電說明

充電指示燈
(紅色/綠色)



將充電線插入背面
充電 Type C 接口

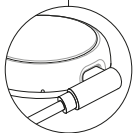

充電指示燈



紅燈長亮

充電中



紅燈閃爍

電量不足



綠燈長亮

充電完成

閃爍模式



快閃

舒痛模式



慢閃

養生模式

注意事項

1. 請勿將產品放置於高溫、潮濕、陽光直射、灰塵多的地方。
2. 請勿讓本產品受到過度衝擊，以免損壞，影響使用。
3. 請勿自行拆解或更換電池，以免發生危險。
4. 請使用隨附的USB充電線進行充電，以免造成產品損壞及危險。
5. 請勿使用電壓超過5V的變壓器為本產品充電，否則可能會導致本產品故障或發生危險。
6. 避免存放在兒童容易接觸的地方。
7. 請勿在損壞或故障情況下使用。
8. 磁鐵的電磁場可能會干擾醫療設備。如身體內裝有心律調節器(心臟起搏器)或有金屬物，我們不建議使用此產品。如對使用此產品上存有疑問，建議詢問醫生，根據專業指示使用。

產品保養方法

1. 產品應保持清潔，避免接觸酸性、油性、粘性等污物。
2. 如若沾染污物，請用柔軟乾布擦拭。
3. 請輕放，避免與硬物過度碰撞。
4. 避免水或其他液體流入主機內部。

包裝清單

主機(1件)·USB Type C充電線(1條)·磁貼片(1件)·產品說明書(1本)·穴位手法手冊(1本)

請掃描二維碼
以啟動您的產品保用服務



保用條款

- 產品如有質量問題，自購買日期起7日內生產商將提供換貨服務。
- 自購買產品日期起1年內，會為產品硬件的缺損提供免費零件更換及維修。
- 生產商不為遺失的配件及產品因有意或無意的濫用、自行拆解、改裝或未經授權的人士修改而可能造成的損壞提供任何保用。
- 生產商不為因意外（包括火災、水災、接觸任何液體等）所產生的損壞提供任何保用。
- 請妥善保存收據，並於維修服務時向職員出示，方為有效。
- 生產商有權隨時修訂上述條款，而毋須先行通知客戶。



產品規格

產品名稱：能量活絡儀 2

產品型號：EF19208BK / EF19208WH

產品尺寸：48mm(直徑) x 15mm(厚)

產品重量：37.6g

產品材質：ABS + PC

電池信息：鋰離子聚合物電池 3.7V 400mAh, 1.48Wh

電池續航：10-12小時

充電時間：3 小時以下

充電壽命：300 次以上

LED 壽命：持續 1000 小時以上

工作電壓：3.0~4.2V

額定輸入：DC 5V 0.2A

光源功率：5 x 0.07W / 2835-LED

執行標準：GB-4706.15-2003

GB 7247.1-2012

GB4208-2008/IP43

磁貼片磁場：接近146mT

香港設計 / 中國製造



客戶服務熱線

(852) 2677 7898